

# Acetocaustin® Warzen Pflaster

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS ACETOCAUSTIN WARZEN PFLASTER VERWENDEN, AUCH WENN SIE DAS PRODUKT SCHON EINMAL BENUTZT HABEN. DIE INFORMATIONEN KÖNNEN SICH AUFGRUND NEUER STUDIEN UND ERKENNTNISSE GEÄNDERT HABEN, SEITDEM SIE DAS PRODUKT LETZTMALS VERWENDET HABEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. FÜR ERWACHSENE UND KINDER (AB 4 JAHREN)

## WAS IST DAS ACETOCAUSTIN WARZEN PFLASTER?

Das Acetocaustin-Warzenentfernungspflaster ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Warzen und Dornwarzen. Das Acetocaustin Warzen Pflaster enthält 40 % Salicylsäure. Das ist eine Substanz, die eine keratolytische Wirkung auf die Haut hat. Sie löst die Warze Schicht für Schicht auf. Salicylsäure sorgt dafür, dass die Zellen, die das Warzenvirus enthalten, zerstört werden.

Der Vorteil des Acetocaustin Warzen Pflasters ist, dass das Auftragen direkt auf die Warze nicht weh tut, sodass das Produkt auch für kleine Kinder geeignet ist, wenn es von einem Erwachsenen korrekt angewendet wird.

## Anwendung: (Anwendung nur durch Erwachsene)

- Weichen Sie die Warze vor der Anwendung für 5 Minuten in warmem Wasser ein. Reinigen und trocknen Sie die Haut vor der Anwendung und stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Warze frei von Cremes und Ölen ist.
- Das Acetocaustin Warzen Pflaster sollten Sie bei Bedarf so zuschneiden, dass das Stück nur auf den betroffenen Hautbereich der Warze passt. Entfernen Sie dann die Schutzfolie und bringen Sie es an.
- Lassen Sie das Pflaster dran, bis es sich ablöst. Entfernen Sie das Pflaster nach maximal 48 Stunden.
- Weichen Sie die betroffene Stelle 5 Minuten lang in warmem Wasser ein, bevor Sie abgestorbene Hautreste entfernen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf bis zu 14 Tage lang.

## ⚠️ WARNUNGEN

Verwenden Sie das Acetocaustin Warzen Pflaster nicht in folgenden Fällen:

- Bei Kindern unter 4 Jahren ohne ärztliche Aufsicht
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Diabetiker sind, überempfindlich auf Salicylsäure reagieren oder eine schlechte Durchblutung haben.
- Bei schwangeren Frauen und Kindern: Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht eines Arztes.
- Bei Genitalwarzen oder im Genitalbereich.
- Ist nicht in der Nähe der Augen oder bei tiefen Wunden mit engen Öffnungen zu verwenden.
- Es kommt zu Hautschäden, wenn die gesunde Haut mit Salicylsäure in Kontakt kommt.

## ⚠️ WARNUNGEN

- Nur für die äußere Anwendung bestimmt
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht nachlassen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Die Nutzung durch Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Kontakt mit Kleidung, Textilien, Tischtüchern oder der Haut vermeiden.
- Nicht wiederverwenden.

- Entsorgen Sie das Produkt sorgfältig, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

## NEBENWIRKUNGEN

Das Acetocaustin Warzen Pflaster kann einige Nebenwirkungen verursachen, die jedoch nicht bei jedem auftreten müssen. Die Nebenwirkungen, die bei der Anwendung des Acetocaustin Warzen Pflasters auftreten können, sind Hautreizungen, Brennen, Hautrötungen oder Überempfindlichkeitsreaktionen. Wenn eine dieser Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## WECHSELWIRKUNG VON MEDIKAMENTEN

Uns sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

## INHALT DES ACETOCAUSTIN WARZEN PFLASTERS

Acetocaustin Warzen Pflaster bestehen aus Moleksin-Gewebe, das vollständig mit einem Klebesubstrat beschichtet ist, das 40 % Salicylsäure enthält. Eine Packung enthält 20 Acetocaustin-Warzenentfernungspflaster.

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Lagern Sie das Acetocaustin Warzen Pflaster bei einer Temperatur von 0–40 °C an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.



Das Verfallsdatum ist auf der Unterseite der Verpackung aufgedruckt.

Weitere Informationen über das Acetocaustin-Warzenentfernungspflaster finden Sie unter [www.acetocaustin.de](http://www.acetocaustin.de). Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bitte an den Händler.

## MEDIZINPRODUKT:

Acetocaustin Warzen Pflaster ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

 **HERSTELLER / LIEFERANT**  
THEOTCLAB  
Fred. Roeskestraat 115  
1076 EE Amsterdam  
Die Niederlande










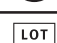
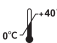


 **E C Rep Ltd,**  
5 Fitzwilliam Square East  
Dublin 2, D02 R744, Ireland

Acetocaustin Warzen Pflaster wird exklusiv von Pharmaplast s.a.e. für TheOTCLab hergestellt:

 **Pharmaplast S.A.E**  
Amria, Free zone 23512  
Alexandria, Egypt

## ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Die Warzelzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbol	Erläuterung
	Symbol für den Hersteller
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren
	Symbol, das darauf hinweist, dass beim Betrieb des Geräts Vorsicht geboten ist
	Symbol für das Verfallsdatum
	Symbol, das angibt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt
	Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt vor Sonnenbestrahlung geschützt werden muss.
	Weist auf ein Medizinprodukt hin, das für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist.
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden
	Symbol für die Chargennummer
	Das Produkt muss zwischen 0 °C und 40 °C gelagert werden.
	Weist auf ein Medizinprodukt hin, das nicht zu verwenden ist, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde.
	Weist auf das Vorhandensein von Naturkautschuk oder trockenem Naturkautschuklatex als Konstruktionsmaterial in dem Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinprodukts hin, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann.
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union

